

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung dieses Produkts. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker oder Arzt oder setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung.

BAUSCH + LOMB

## Vividrin® ectoin® MDO®

DE

**Zusammensetzung:** 0,24 % Hyaluronsäure (als Natriumhyaluronat), 2 % Ectoin®, Natriumchlorid, Natriumhydroxid (zur pH-Einstellung) und Wasser für Injektionszwecke

**Zweckbestimmung:** Zur unterstützenden Behandlung und Vorbeugung von Symptomen einer allergischen Bindehautentzündung, Linderung von entzündlichen Augenreizungen und beruhigende Augenbefeuchtung.

### Was ist Vividrin® ectoin® MDO®?

Es ist ein Medizinprodukt, das Ectoin® enthält, ein natürliches Zellschutzmolekül mit entzündungshemmenden und membranstabilisierenden Eigenschaften, sowie Hyaluronsäure, ein natürliches Molekül, das das Auge durch seine stark wasserbindenden und stabilisierenden Eigenschaften beruhigt. Es ist frei von Puffern.

Die innovative Formulierung weist eine sehr gute Verträglichkeit auf, da sie frei von Konservierungsstoffen und Puffern ist.

### Anwendung

Vividrin® ectoin® MDO® ist eine isotonische Augentropfenlösung, die zur Behandlung und Vorbeugung von Symptomen saisonaler und ganzjähriger allergischer Bindehaut-Entzündung angewendet werden kann, die z. B. durch Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaare oder Schimmelpilze verursacht werden. Symptome wie juckende, gereizte, gerötete oder tränende Augen werden wirksam reduziert; ihre beruhigende Befeuchtung führt zu einer Linderung, sogar bei entzündlich-gereizten Augen.

Vividrin® ectoin® MDO® reduziert die Bindehautentzündung durch chemisch-physikalische Stimulierung (nicht-pharmazeutische Wirkung).

### Wann sollten Sie Vividrin® ectoin® MDO® anwenden?

Vividrin® ectoin® MDO® stabilisiert den natürlichen Tränenfilm auf zwei Arten: Hyaluronsäure wirkt sich positiv auf die wässrige Phase aus und Ectoin® stärkt die Lipidphase. Diese duale Funktionsweise schützt das Auge vor den schädlichen Einflüssen von Allergenen und anderen äußeren Faktoren und unterstützt den Regenerationsprozess der gereizten und empfindlichen Bindehaut. Vividrin® ectoin® MDO® ist frei von Konservierungsstoffen und für Kontaktlinsträger sowie Personen mit empfindlichen Augen geeignet.

### Wie oft und wie lange ist Vividrin® ectoin® MDO® anzuwenden?

Geben Sie nach Bedarf 1 bis 2 Tropfen Vividrin® ectoin® MDO® ins Auge. Sie können die Tropfen täglich und so oft anwenden, wie Sie möchten. Die Anwendungsdauer ist nicht begrenzt.


### Wie ist Vividrin® ectoin® MDO® anzuwenden?

Durch den patentierten Pumpmechanismus von Vividrin® ectoin® MDO® benötigt die Augentropfenlösung keine Konservierungsstoffe.


**Allgemeine Anmerkung:** Waschen Sie sich vor jeder Anwendung die Hände. Vermeiden Sie den Kontakt der Flaschenspitze mit Ihren Fingern oder Augen, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung oder Augenverletzungen zu verhindern.



1. Entfernen Sie vor jedem Gebrauch die blaue Schutzkappe mit einer Drehbewegung von der Flaschenspitze.

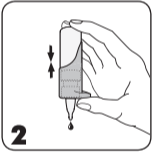

2. **Achtung! Vor dem ersten Gebrauch und wenn die Flasche eine Zeit lang nicht verwendet wurde:** Halten Sie die Flasche mit der Spitze nach unten und drücken Sie wiederholt auf den Pumpmechanismus, bis ein Tropfen freigesetzt wird.

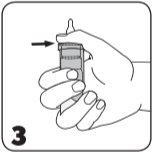

3. Halten Sie die Flasche wie gezeigt: Legen Sie Ihren Daumen auf die ergonomische Daumenauflage und umschließen Sie den unteren Teil mit Ihren Fingern. Zwei Finger sollten am Flaschenboden platziert werden.



4. Halten Sie die Flasche mit der Spitze nach unten. Legen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten. Ziehen Sie Ihr unteres Augenlid mit einem Finger Ihrer freien Hand leicht nach unten. Halten Sie die Flasche wie abgebildet senkrecht über Ihr Auge. Drücken Sie den Pumpmechanismus behutsam, um einen Tropfen in das Auge einzutropfen.

Schließen Sie nach der Anwendung Ihr Auge und blinzeln Sie, um den Tropfen optimal auf der Augenoberfläche zu verteilen.

5. Schütteln Sie sofort nach dem Gebrauch eventuelle Resttropfen von der Flasche ab und setzen Sie die blaue Schutzkappe wieder auf die Flaschenspitze.

Aufgrund des Flaschensdesigns verbleibt eine kleine Menge Lösung in der Flasche. Die angegebene Füllmenge kann jedoch vollständig aus der Flasche entnommen werden.

### Wann sollte Vividrin® ectoin® MDO® nicht angewendet werden?

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe empfindlich reagieren.

### Wichtige Informationen zu der Anwendung von Vividrin® ectoin® MDO®

- In sehr seltenen Fällen können lokale Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. In diesen Fällen muss die Behandlung beendet werden.
- Wenn anhaltendes Unbehagen oder Irritationen auftreten, brechen Sie die Anwendung des Produkts ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Nach dem Einträufeln des Produkts kann kurzzeitig eine verschwommene Sicht auftreten, die zu Beeinträchtigungen beim Führen von Fahrzeugen oder bei der Bedienung von Maschinen führen kann.
- Berühren Sie die Augenoberfläche nicht mit der Flaschenspitze, um eine mögliche Verletzung der Augenoberfläche oder eine Verunreinigung der Lösung zu vermeiden.
- Berühren Sie die Flaschenspitze nicht mit den Fingern, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung zu vermeiden.
- Geben Sie die Flasche nach dem Öffnen nicht an andere Personen für deren Gebrauch weiter.
- Ein unvorsichtiger Umgang mit dem Produkt entgegen der Gebrauchsanweisung kann dazu führen, dass das Produkt aus der Hand rutscht und Augenverletzungen verursacht.
- Warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie ein anderes Augenprodukt verwenden.
- Entsorgen Sie das Medizinprodukt 6 Monate nach dem ersten Öffnen.
- Nach Ablauf des „Verwendbarkeitsdatums“ nicht mehr verwenden.

- Nicht verwenden, wenn die Verpackung oder Flasche beschädigt ist.

- Vividrin® ectoin® MDO® enthält Kleinteile aus Plastik (Schutzkappe), die von Kindern verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr. Daher muss Vividrin® ectoin® MDO® für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

- Vividrin® ectoin® MDO® ist für die Anwendung mit weichen und harten Kontaktlinsen geeignet.

- Für die Anwendung dieses Produkts ist keine spezielle Schulung erforderlich.

- Nach derzeitigem Kenntnisstand kann dieses Produkt bei schwangeren Frauen, stillenden Müttern und Kindern eingesetzt werden.

- Wenn Ihr Kind unter trockenen Augen leidet, sprechen Sie vor der Anwendung eines Augengels mit einem Arzt.

**Lagerung:** Bei einer Temperatur zwischen 2 und 25 °C lagern. Dank des Flaschensdesigns kann Vividrin® ectoin® MDO® nach dem Öffnen 6 Monate lang verwendet werden.

**Entsorgung:** Das Produkt ist entsprechend den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

In Verbindung mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfälle sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

BAUSCH + LOMB

## Vividrin® ectoin® MDO®

FR

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, il contient des informations importantes pour l'utilisation de ce produit. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre pharmacien ou votre médecin, ou vous mettre en relation avec l'information médicale.

**Composition:** 0,24 % d'acide hyaluronique (sous forme de hyaluronate de sodium), 2 % d'Ectoin®, chlorure de sodium, hydroxyde de sodium (pour l'ajustement du pH) et de l'eau pour l'injection

**Utilisation:** Prévention et soulagement des symptômes de la conjonctivite allergique, soulagement des yeux irrités par l'inflammation et lubrification apaisante des yeux.

### Qu'est-ce que Vividrin® ectoin® MDO®?

Vividrin® ectoin® MDO® est un dispositif médical qui contient de l'Ectoin®, une molécule naturelle de protection cellulaire qui aide à réduire l'inflammation et stabilise les membranes, ainsi que de l'acide hyaluronique un hydratant naturel aux propriétés apaisantes.

La formule présente une très bonne tolérance car elle ne contient ni conservateur ni substance tampon.

**Consignes d'utilisation:** Vividrin® ectoin® MDO® est une solution ophtalmique isotonique qui peut être utilisée pour prévenir et soulager les symptômes de la conjonctivite allergique saisonnière et perannuelle causée, par exemple, par les pollens, les acariens, les poils d'animaux ou les moisissures, etc. Les symptômes tels que les démangeaisons, l'irritation, les rougeurs oculaires ou les larmoiements sont soulagés efficacement; leur lubrification apaisante permet de soulager, même les yeux irrités par l'inflammation.

Vividrin® ectoin® MDO® réduit l'inflammation de la conjonctive due à des stimuli physico-chimiques par une action non pharmaceutique.

### Quand utiliser Vividrin® ectoin® MDO®?

Vividrin® ectoin® MDO® stabilise le film lacrymal naturel de deux manières: l'acide hyaluronique agit de façon positive sur la phase aqueuse et l'Ectoin® renforce la phase lipidique. Ce double mode d'action protège l'œil contre les agressions des allergènes et d'autres facteurs externes et aide au processus de régénération de la conjonctive irritée et sensibilisée. Vividrin® ectoin® MDO® est sans conservateur, convient aux porteurs de lentilles de contact, et est adapté aux yeux sensibles.

### Fréquence et durée du traitement par Vividrin® ectoin® MDO®?

Instillez 1 à 2 gouttes de Vividrin® ectoin® MDO® dans l'œil lorsque vous en ressentez le besoin. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement et aussi souvent que nécessaire. Il n'existe pas de limite de durée d'utilisation.


### Comment utiliser Vividrin® ectoin® MDO®?

Vividrin® ectoin® MDO® dispose d'un mécanisme de pompe breveté permettant de ne pas inclure d'agent conservateur


**Note générale:** Lavez-vous les mains avant chaque utilisation. Évitez tout contact entre l'embout du flacon et vos doigts ou la surface de votre œil afin d'éviter tout risque de contamination de la solution ou de blessure de l'œil.



1. Avant chaque utilisation, enlevez le bouchon protecteur bleu de l'embout du flacon par un mouvement rotatif.

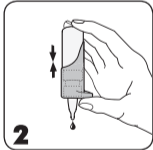

2. **Attention ! Avant la première utilisation et si le flacon n'a pas été utilisé depuis un certain temps:** Retournez le flacon vers le bas, appuyez sur le mécanisme de pompe de façon répétée, jusqu'à ce qu'une goutte tombe.

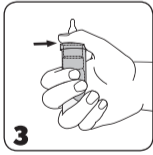

3. Tenez le flacon comme indiqué: Placez votre pouce sur le support pouce ergonomique et deux autres doigts sur le bas du flacon.



4. Retournez le flacon et penchez légèrement la tête en arrière. Tirez doucement votre paupière inférieure vers le bas avec un doigt de votre main libre, tenez le flacon en position verticale au-dessus de l'œil et appuyez sur le mécanisme de pompe pour instiller une goutte dans votre œil.

Fermez l'œil et tournez-le doucement afin de diffuser la solution uniformément à la surface de votre œil.

5. Immédiatement après utilisation, secouez le flacon pour éliminer les éventuelles gouttes résiduelles et replacez le bouchon protecteur bleu sur l'embout du flacon.

En raison de la conception du flacon, il reste un peu de solution dans le flacon. Cependant, on peut entièrement vider le flacon du volume de remplissage déclaré.

### Quand ne faut-il pas utiliser Vividrin® ectoin® MDO®?

N'utilisez pas ce produit en cas d'hypersensibilité à l'un de ses ingrédients.

### Informations importantes concernant l'utilisation de Vividrin® ectoin® MDO®

- Des réactions d'hypersensibilité locale ont été très rarement rapportées. Dans ce cas, le traitement doit être interrompu.
- En cas d'irritation ou d'inconfort persistant, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.
- Ce produit peut provoquer des troubles temporaires de la vision après l'instillation, ce qui entraîne un risque potentiel pour les conducteurs de véhicules ou les opérateurs de machines.

- Ne touchez pas la surface de l'œil avec l'embout du flacon afin d'éviter toute blessure de la surface de l'œil ou une contamination de la solution.
- Ne touchez pas l'embout du flacon avec les doigts afin d'éviter une contamination de la solution.
- Une fois ouvert, ne partagez pas le flacon avec d'autres personnes.
- Une mauvaise utilisation du produit, contraire aux instructions d'utilisation, peut provoquer le glissement du flacon de votre main et causer des blessures à l'œil.
- Attendez environ 15 minutes avant d'utiliser un autre produit ophtalmique.
- Jetez le dispositif médical 6 mois après ouverture du flacon.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Ne pas utiliser si l'emballage ou le flacon est endommagé.
- **Vividrin® ectoin® MDO** contient de petites pièces en plastique (bouchon protecteur) pouvant être avalées par de jeunes enfants. Il existe un risque d'étouffement, c'est pourquoi **Vividrin® ectoin® MDO** doit être tenu hors de portée des enfants.
- **Vividrin® ectoin® MDO** peut s'utiliser avec des lentilles de contact souples et rigides.
- Ce produit peut être utilisé par une personne profane n'ayant reçu aucune formation particulière.
- Selon les connaissances actuelles, ce produit peut être utilisé chez les femmes enceintes, allaitantes et chez les enfants.
- Si votre enfant souffre de sécheresse oculaire, consultez un médecin avant d'utiliser un lubrifiant oculaire.

**Conservation :** A conserver à une température comprise entre + 2 °C et + 25 °C.

Le flacon est conçu de sorte que vous puissiez utiliser **Vividrin® ectoin® MDO** pendant 6 mois après ouverture.

**Élimination :** Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales.

Tout incident grave dû à l'utilisation de ce produit doit être signalé au fabricant et à l'ANSM.

**BAUSCH + LOMB**

## Vividrin® ectoin® MDO® IT

Leggere con attenzione queste istruzioni per l'uso: esse contengono informazioni importanti sull'utilizzo del presente prodotto. Per qualsiasi domanda, rivolgersi al farmacista, al medico, oppure direttamente a noi.

**Composizione:** acido ialuronico 0,24% (come ialuronato di sodio), Ectoin® 2%, cloruro di sodio, idrossido di sodio (per la regolazione del pH) e acqua per preparazioni iniettabili.

**Uso previsto:** Soluzione oftalmica per il trattamento e la prevenzione dei sintomi della congiuntivite allergica, per donare sollievo dall'infiammazione e idratazione agli occhi irritati.

**Che cos'è Vividrin® ectoin® MDO®?**

**Vividrin® ectoin® MDO®** è un dispositivo medico che contiene Ectoin®, una molecola naturale che agisce proteggendo le cellule, con proprietà anti-infiammatorie e stabilizzanti della membrana cellulare, e acido ialuronico, una molecola naturale che dona sollievo all'occhio grazie alle sue elevate capacità di legare e stabilizzare l'acqua.

La formulazione tecnologicamente avanzata possiede una tollerabilità molto alta, essendo priva di conservanti e sostanze tamponanti.

**Indicazioni per l'uso: Vividrin® ectoin® MDO®** è una soluzione oculare isotonica che può essere utilizzata per trattare e prevenire i sintomi della congiuntivite allergica stagionale e perenne causata da pollini, acari della polvere, peli di animali o muffe, ecc. Contribuisce a ridurre efficacemente sintomi come prurito, irritazione, arrossamento o lacrimazione, grazie alle sue proprietà idratanti. **Vividrin® ectoin® MDO®** riduce l'infiammazione della congiuntiva dovuta a stimoli chimico-fisici tramite azione non farmaceutica.

**Quando usare Vividrin® ectoin® MDO®?**

**Vividrin® ectoin® MDO®** stabilizza il film lacrimale naturale in due modi: l'acido ialuronico ha un impatto positivo sullo strato acquoso, mentre Ectoin® rafforza lo strato lipidico. Questa doppia azione protegge l'occhio dalle influenze dannose di allergeni e altri fattori esterni e supporta il processo di rigenerazione della congiuntiva irritata e sensibile. **Vividrin® ectoin® MDO®** è privo di conservanti ed è adatto ai portatori di lenti a contatto e in caso di occhi sensibili.

**Con che frequenza e per quanto tempo utilizzare Vividrin® ectoin® MDO®?**

Instillare 1-2 gocce di **Vividrin® ectoin® MDO®** nell'occhio in base alle esigenze. Può essere utilizzato ogni giorno e più volte al giorno, con la frequenza desiderata. Può essere usato anche per periodi di tempo prolungati.

**Come usare Vividrin® ectoin® MDO®?**


Il meccanismo di erogazione brevettato di **Vividrin® ectoin® MDO®** permette di avere una soluzione oculare priva di conservanti grazie all'innovativo flacone.

**Nota generale:** lavarsi le mani prima di ogni utilizzo. Evitare il contatto della punta del flaconcino con le dita o con gli occhi, per evitare ogni eventuale contaminazione della soluzione o lesione oculare.


Le immagini mostrano l'uso semplice e facile di **Vividrin® ectoin® MDO®**



1. Prima di ogni utilizzo, rimuovere il cappuccio protettivo blu dalla punta del flaconcino con un movimento rotatorio.

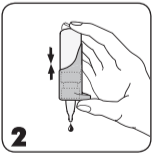

2. **Attenzione! Al primo utilizzo e se il flaconcino non è stato usato per un certo periodo di tempo:** ruotare il flaconcino con la punta rivolta verso il basso e premere ripetutamente il meccanismo erogatore fino al rilascio di una goccia.

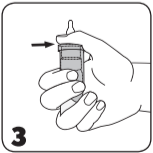

3. Tenere il flaconcino come indicato: posizionare il pollice sull'apposito supporto ergonomico e impugnare la parte inferiore con le altre dita. Due dita devono essere posizionate sul fondo del flaconcino.



4. Tenere il flaconcino con la punta rivolta verso il basso. Inclinare leggermente la testa all'indietro. Abbassare delicatamente la palpebra inferiore con un dito della mano libera. Tenere il flaconcino in posizione verticale sopra l'occhio, come mostrato. Premere delicatamente il meccanismo erogatore per applicare una goccia nell'occhio.

Dopo l'instillazione chiudere l'occhio e sbattere la palpebra per consentire una distribuzione ottimale della goccia sulla superficie oculare.

5. Immediatamente dopo l'uso, eliminare eventuali gocce residue dal flaconcino e riposizionare il cappuccio protettivo blu sulla punta del flaconcino.

Per via del design del flaconcino, una piccola quantità di soluzione rimane al suo interno. Tuttavia, il volume di riempimento specificato viene interamente erogato.

**Quando non utilizzare Vividrin® ectoin® MDO®?**

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità a uno degli ingredienti.

**Informazioni importanti sull'uso di Vividrin® ectoin® MDO®**

- Molto raramente sono state riportate reazioni di ipersensibilità locale. In questi casi, il trattamento va interrotto.
- In caso di fastidio o irritazione persistente, interrompere l'uso del prodotto e consultare il medico.
- Questo prodotto può causare temporaneamente una visione offuscata dopo l'instillazione, con possibile impatto negativo sulla guida di veicoli o sull'utilizzo di macchinari.
- Non toccare la superficie dell'occhio con la punta del flaconcino, per evitare qualsiasi possibile ferita o contaminazione della soluzione.
- Evitare il contatto della punta del flaconcino con le dita, per evitare possibili contaminazioni della soluzione.
- Dopo l'apertura, non condividere il flaconcino con altre persone.
- L'utilizzo scorretto del prodotto contrariamente a quanto riportato nelle istruzioni per l'uso potrebbe far scivolare il prodotto dalle mani e causare lesioni all'occhio.
- Attendere circa 15 minuti prima di utilizzare un altro prodotto per gli occhi.
- Eliminare il dispositivo medico dopo 6 mesi dall'apertura.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare se la confezione o il flaconcino sono danneggiati.
- **Vividrin® ectoin® MDO®** contiene piccole parti in plastica (cappuccio di protezione) che potrebbero essere ingerite dai bambini piccoli, con pericolo di soffocamento. Pertanto, **Vividrin® ectoin® MDO®** deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- **Vividrin® ectoin® MDO®** è adatto per l'uso con lenti a contatto morbide e rigide.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da persone non specificatamente addestrate.
- In base alle attuali conoscenze, il prodotto può essere utilizzato dalle donne in gravidanza, durante l'allattamento e nei bambini.
- In caso di secchezza oculare nei bambini, consultare un medico prima di usare un lubrificante oculare.

**Come conservare Vividrin® ectoin® MDO®:**

Conservare a una temperatura compresa tra 2 °C e 25 °C.

Lo speciale flaconcino consente di utilizzare **Vividrin® ectoin® MDO®** per 6 mesi dopo la prima apertura.

**Smaltimento:**

Il prodotto deve essere smaltito conformemente alle normative locali.

Qualsiasi incidente grave si verifichi in relazione al prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente.

**Symbolerklärung / Explication des symboles / Spiegazione dei simboli**

|  |  |
|--|--|
|  | Europäisches Konformitätsbewertungsverfahren für Medizinprodukte<br>CE-Zeichen mit Nummer der benannten Stelle / Evaluation européenne de la conformité des dispositifs médicaux<br>Marquage CE avec numéro de l'organisme notifié / Valutazione europea della conformità dei dispositivi medici<br>Marchio CE con numero dell'organismo notificato  |
|  | Medizinprodukt / Dispositif médical / Dispositivo medico   |
|  | Einmalige Produktkennung<br>GTIN (01) Produktkennung<br>EXP (17) Verwendbar bis (Format: JJMMTT)<br>LOT (10) Chargenbezeichnung / Identifiant unique de dispositif<br>GTIN (01) identifiant de dispositif<br>EXP (17) date limite d'utilisation (format: aammjj)<br>LOT (10) numéro de lot / Identificazione univoca del dispositivo<br>GTIN (01) identificazione del dispositivo<br>EXP (17) data di scadenza (formato: aammgg)<br>LOT (10) numero di lotto |
|  | Hersteller / Fabricant / Fabbicante<br>Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH,<br>Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin, Germany   |
|  | Herstellungsdatum / Date de fabrication / Data di fabbricazione  |
|  | Gebrauchsanweisung beachten / Lire les instructions d'utilisation / Consultare le istruzioni per l'uso   |
|  | Chargenbezeichnung / Numéro de lot / Codice lotto  |
|  | Verwendbar bis (JJJJ-MM) / Date de péremption (AAAA-MM) – ne pas utiliser après la date de péremption / Data di scadenza (AAAA-MM)   |
|  | Sterilisiert mit aseptischem Verfahren und verpackt in einem einfachen Sterilbarriersystem / Méthode de stérilisation aseptique et conditionné dans un système de barrière stérile unique. / Sterilizzato con tecniche di lavorazione in asepsi e confezionato in un unico sistema di barriera sterile   |
|  | Temperaturbegrenzung / Stockage du dispositif médical à une température comprise entre + 2 °C et + 25 °C / Limiti di temperatura   |
|  | Achtung (wichtige Warnhinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung) / Attention : Consultez les instructions d'utilisation pour obtenir des informations importantes telles que des avertissements et des précautions d'emploi / Attenzione (consultare le istruzioni per l'uso per importanti informazioni di avvertimento)  |
|  | Kann nach dem ersten Öffnen 6 Monate verwendet werden / Après la première utilisation, le dispositif médical se conserve 6 mois. / Può essere utilizzato per 6 mesi dopo la prima apertura   |
|  | Nicht verwenden, wenn die Verpackung oder Flasche beschädigt ist / Ne pas utiliser si l'emballage ou le flacon est endommagé / Non utilizzare se la confezione o il flaconcino sono danneggiati  |

**Ausgabedatum: / Date de publication / Data di emissione: Vividrin® ectoin® MDO®, „I228EU-04“, (2024-11)**

Ectoin is a trademark of Bitop AG.

VIVIDRIN and MDO are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

81920PB228/4-DE+ / PIDEATCH06