

Test destiné à l'autodiagnostic.

PRINCIPE

Le test de grossesse 8 jours est un test de détection de la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) dans un échantillon d'urine afin de permettre la détection de la grossesse. Le test utilise une combinaison d'anticorps permettant de détecter de manière sélective la présence de l'hormone de la grossesse hCG. Le test est effectué en urinant directement sur la mèche absorbante ou en immergeant celle-ci dans l'urine. La lecture du résultat se fait par la mise en évidence de bandes colorées.

PRÉCAUTIONS

Lire entièrement cette notice d'utilisation avant de réaliser le test.


- Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur le sachet aluminium.
- Conserver dans un endroit sec à des températures comprises entre 2-30 °C. Ne pas congeler.
- Ne pas utiliser si le sachet est déchiré ou endommagé.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour diagnostic in vitro uniquement. Ne pas ingérer.
- Ne pas ouvrir le sachet en aluminium du test avant la réalisation du test.
- Le test urinaire utilisé doit être mis au rebut conformément à la réglementation locale.

MATÉRIEL FOURNI

- 1 sachet aluminium contenant 1 test
- 1 sachet dessiccant
- 1 mode d'emploi

MODE D'EMPLOI

1. Sortir le test de sa pochette en aluminium et l'utiliser dans l'heure qui suit.
2. Retirer le capuchon du test, puis diriger le jet d'urine sur la mèche pendant 15 secondes ou la tremper pendant au moins 15 secondes dans un échantillon d'urine recueilli dans un récipient propre.
3. Remettre le capuchon sur l'embout et déposer le test sur une surface propre et stable. Démarrer aussitôt le chronomètre.
4. Le résultat doit être lu à partir de 3 minutes et ne doit plus être interprété après 10 minutes.

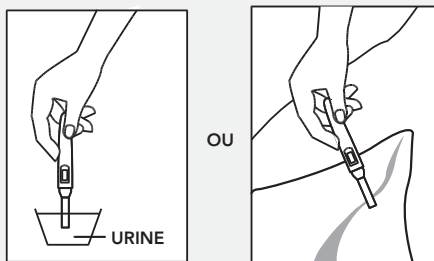

Votre avis nous intéresse ! Complétez le questionnaire disponible en flashant ce QR code ou via le lien suivant :

Il est important ! Complétez le questionnaire disponible en flashant ce QR code ou via le lien suivant :

Il est important ! Complétez le questionnaire disponible en flashant ce QR code ou via le lien suivant :

<https://forms.office.com/e/43AUrgpuXP>



LECTURE DES RÉSULTATS



POSITIF

Deux bandes colorées distinctes apparaissent. Une bande doit apparaître dans la fenêtre ronde (C) et une deuxième bande doit être visible au niveau de la fenêtre carrée (T). Il se peut qu'une bande soit plus claire que l'autre, elles ne doivent pas être nécessairement d'intensités identiques. Ce résultat signifie que vous êtes probablement enceinte.



NÉGATIF

Une bande colorée apparaît au niveau de la fenêtre ronde (C). Aucune bande n'apparaît au niveau de la fenêtre carrée (T). Ce résultat signifie que vous n'êtes probablement pas enceinte.



INVALIDE

Le résultat est invalide si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la fenêtre ronde (C), même si une bande apparaît dans la zone de la fenêtre carrée (T). Vous devriez refaire un test.

LIMITES

1. Les médicaments qui contiennent de l'hCG peuvent entraîner un résultat faussement positif. L'alcool, les contraceptifs oraux, les antalgiques, les antibiotiques et les traitements hormonaux ne contenant pas d'hCG ne devraient pas affecter les résultats du test.
2. La prise abondante de boisson avant la réalisation du test peut entraîner une dilution des urines et de l'hormone hCG. Pour un diagnostic précoce, il est recommandé d'utiliser la première urine matinale qui est généralement plus concentrée en hormone hCG.
3. Chez des femmes d'un certain âge ou en période de pré-ménopause, il est possible d'obtenir un faux positif (dû à l'augmentation du taux de hCG d'origine pituitaire avec l'âge).
4. Un arrêt précoce de la grossesse (ou fausse couche très précoce) peut entraîner un résultat positif. La diminution du taux de hCG chute alors rapidement (au lieu d'augmenter) entraînant rapidement un résultat négatif. Pour confirmer la poursuite de la grossesse, il est recommandé de réaliser un second test sur les premières urines du matin du premier jour de retard des règles.
5. Dans certaines situations cliniques, le test peut produire des résultats faussement positifs, par exemple en cas de cancer du sein ou du poumon ou de maladies trophoblastiques.
6. Un diagnostic de grossesse doit être confirmé par un avis médical après une évaluation des données cliniques et de laboratoire.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. Comment fonctionne le test urinaire ?

Le test de grossesse 8 jours détecte une hormone dans votre urine que votre corps produit pendant la grossesse (la gonadotrophine chorionique humaine - hCG). La concentration d'hormone hCG augmente suivant l'avancement de la grossesse.

2. Quand puis-je procéder au test une fois que je pense être enceinte ?

Vous pouvez réaliser le test de grossesse 8 jours à partir du 8^{ème} jour suivant un rapport sexuel fécondant soit plus de 5 jours après la conception. A cette date, une étude a montré que 69% des femmes enceintes ont déjà un test positif.

Remarque: Ne pas confondre rapports sexuels et conception. Cette dernière peut avoir lieu dans les 3 jours après le rapport sexuel. C'est la raison pour laquelle, il convient de considérer que 5 jours après la conception équivaut à 8 jours après le rapport sexuel. En cas de résultat négatif et suspicion de grossesse, il est recommandé de réaliser un second test sur la première urine matinale le premier jour du retard de vos règles. Dans le cas où la grossesse est suspectée et que le test est encore négatif, consulter un médecin pour un diagnostic plus approfondi. Vous pouvez effectuer le test à tout moment de la journée; cependant, si vous êtes enceinte, l'urine du matin contient le plus d'hormones de grossesse.

3. Dois-je effectuer le test avec la première urine matinale ?

Bien que le test puisse être effectué à tout moment de la journée, la première urine matinale est généralement la plus concentrée de la journée et contient donc le plus d'hCG.

4. Quelle est la précision du test ?

Une évaluation clinique a été conduite pour comparer les résultats obtenus en utilisant le test de grossesse 8 jours avec les résultats d'un autre test hCG urinaire disponible dans le commerce. L'étude clinique réalisée sur des échantillons prélevés à partir du premier jour du retard des règles comprenait 608 échantillons d'urine : les deux tests ont identifié 231 résultats positifs et 377 résultats négatifs. Les résultats ont démontré une fiabilité > 99 % pour le Test de grossesse hCG rapide en comparaison avec l'autre test hCG urinaire.

5. Quelle est la sensibilité du test ?

Le test de grossesse 8 jours détecte l'hCG dans l'urine à partir d'une concentration de 10 mIU/ml. L'ajout de LH (300 mIU/ml), de FSH (1 000 mIU/ml) et de TSH (1 000 µIU/ml) à des échantillons négatifs (0 mIU/ml hCG) et positifs (10 mIU/ml hCG) n'a provoqué aucune réaction croisée.

6. Que dois-je faire si le résultat est positif ?

Cela signifie que votre urine contient de l'hCG et que vous êtes probablement enceinte. Consultez votre médecin pour confirmer la grossesse et discuter de sa prise en charge.

7. Comment puis-je savoir que le test a été effectué correctement ?

L'apparition d'une bande colorée au niveau de la fenêtre ronde (C) vous indique que vous avez suivi la procédure du test correctement et qu'une quantité d'urine suffisante a été absorbée.

8. Que dois-je faire si le résultat est négatif ?

Cela signifie que l'hormone hCG n'a pas été détectée dans votre urine. Il s'agit alors d'une absence de grossesse ou d'un stade très précoce de la grossesse avec un niveau indétectable d'hCG. Un nouveau test doit être répété le premier jour du retard de vos règles. Si le résultat est à nouveau négatif et que vos règles sont retardées, consultez votre médecin.

Zur Selbstdiagnose.

TESTPRINZIP

Der Früherkennungstest ist ein Urin Test zum Nachweis von humanen Choriongonadotropin (hCG) um eine Schwangerschaft festzustellen. Der Test verwendet eine Kombination von Antikörpern, die einen selektiven Nachweis des Schwangerschaftshormons hCG ermöglichen. Zur Durchführung des Tests urinieren Sie direkt auf die absorbierende Spitze oder tauchen die Spitze in den Urin. Das Ablesen des Ergebnisses erfolgt anhand farbiger Linien.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Test durchführen.


- Den Test nach Ablauf des Verfallsdatums auf dem Aluminiumbeutel nicht mehr verwenden.
- An einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 2 und 30°C aufbewahren. Nicht einfrieren.
- Nicht verwenden, wenn der Beutel aufgerissen oder beschädigt ist.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nur für die In-vitro-Diagnose. Nicht einnehmen.
- Den Aluminiumbeutel mit dem Test erst umgehend vor der Durchführung öffnen.
- Der Urin muss nach dem Gebrauch entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

INHALT DER TESTPACKUNG

- Ein Aluminiumbeutel mit 1 Test
- 1 Trocknungsmittel enthaltender Beutel
- 1 Gebrauchsanweisung

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Nehmen Sie den Test aus dem Aluminiumbeutel und verwenden Sie ihn binnen einer Stunde.
2. Nehmen Sie die Kappe des Tests ab und halten Sie die Spitze direkt unter Ihren Urinstrahl oder tauchen Sie die Spitze mindestens 15 Sekunden lang in die Urinprobe, die Sie in einem sauberen, trockenen Behälter gesammelt haben.
3. Setzen Sie die Kappe wieder auf die Spitze und legen Sie den Test auf eine saubere und stabile Fläche. Starten Sie umgehend den Zeitmesser.
4. Das Ergebnis muss nach drei Minuten abgelesen werden und ist nach 10 Minuten nicht mehr auswertbar.

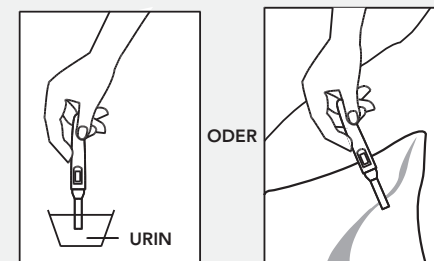

ABLESEN DER ERGEBNISSE



POSITIV

Zwei eindeutig voneinander zu unterscheidende farbige Linien erscheinen. Eine Linie muss im runden Fenster (C) erscheinen und eine zweite Linie muss im quadratischen Fenster (T) sichtbar sein. Es kann vorkommen, dass eine Linie heller ist als die andere. Die beiden Linien müssen nicht die gleiche Farbintensität aufweisen. Dieses Ergebnis bedeutet, dass Sie wahrscheinlich schwanger sind.



NEGATIV

Eine farbige Linie erscheint im runden Fenster (C). Im quadratischen Fenster (T) ist keine Linie sichtbar. Dieses Ergebnis bedeutet, dass Sie wahrscheinlich nicht schwanger sind.



UNGÜLTIG

Das Ergebnis ist ungültig, wenn in dem runden Fenster (C) keine Linie zu sehen ist, selbst wenn eine Linie im quadratischen Fenster (T) erscheint. Sie sollten einen neuen Test durchführen.

BEGRENZUNGEN

1. Medikamente auf hCG-Basis können zu einem falsch positiven Ergebnis führen. Alkohol, orale Empfängnisverhütungsmittel, Schmerzmittel, Antibiotika und Hormonbehandlungen, die kein hCG enthalten, sollten keinen Einfluss auf das Testergebnis haben.
2. Die Flüssigkeitsaufnahme vor der Durchführung des Tests kann eine Verdünnung des Urins und damit auch des Hormons hCG zur Folge haben. Für eine frühzeitige Diagnose empfiehlt sich die Verwendung des ersten Morgenurins, der in der Regel eine höhere hCG-Konzentration aufweist.
3. Bei Frauen kann es ab einem bestimmten Alter oder in der Zeit vor den Wechseljahren zu falsch-positiven Ergebnissen kommen (durch die altersbedingte Erhöhung der hypophysären hCG-Werte).
4. Ein vorzeitiger Schwangerschaftsabbruch (oder eine sehr frühe Fehlgeburt) können zu einem positiven Ergebnis führen. Die hCG-Werte fallen anschließend schnell ab (statt zu steigen), was zu einem negativen Ergebnis führen kann. Um die Fortsetzung der

Schwangerschaft zu bestätigen, empfiehlt sich die Durchführung eines zweiten Tests mit dem ersten Morgenurin am Tag nach dem Ausbleiben Ihrer Periode.

- Unter bestimmten klinischen Bedingungen kann der Test falsch positive Ergebnisse produzieren, beispielsweise bei Brust- oder Lungenkrebs oder bei einer Trophoblasterkrankung.
- Eine Schwangerschaftsdiagnose muss nach der Auswertung der Ergebnisse der medizinischen Untersuchungen und Laborbefunde durch einen Arzt bestätigt werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Wie funktioniert der Urintest?

Der Test zur Früherkennung weist in Ihrem Urin ein Hormon nach, das Ihr Körper während der Schwangerschaft produziert (humanes Choriongonadotropin - hCG). Die Konzentration des Hormons hCG nimmt im Laufe der Schwangerschaft zu.

2. Wann kann ich den Test durchführen, wenn ich eine Schwangerschaft vermute?

Sie können den Test zur Früherkennung ab dem achten Tag nach einem Geschlechtsverkehr durchführen, der vermutlich zur Befruchtung geführt hat, also 5 Tage nach der Empfängnis. Eine Studie hat gezeigt, dass 69% aller schwangeren Frauen zu diesem Zeitpunkt bereits ein positives Testergebnis erhalten.

Anmerkung: Geschlechtsverkehr ist nicht gleichzusetzen mit Empfängnis. Die Empfängnis kann in den 3 Tagen nach dem Geschlechtsverkehr erfolgen. Das ist der Grund für die Annahme, dass 5 Tage nach der Empfängnis einem Zeitraum von 8 Tagen nach dem Geschlechtsverkehr entspricht. Im Fall eines negativen Ergebnisses und einer vermuteten Schwangerschaft empfiehlt sich die Durchführung eines zweiten Tests mit dem ersten Morgenurin am Tag nach dem Ausbleiben Ihrer Periode. Wenn Sie eine Schwangerschaft vermuten und der Test erneut negativ ausfällt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, um weitere Untersuchungen vorzunehmen. Sie können den Test zu jeder beliebigen Tageszeit durchführen. Sollten Sie schwanger sein, enthält der Morgenurin allerdings größere Mengen des Schwangerschaftshormons.

3. Muss ich den Test mit dem ersten Morgenurin durchführen?

Auch wenn Sie diesen Test zu jeder beliebigen Tageszeit durchführen können, ist Ihr erster Morgenurin in der Regel besonders konzentriert und enthält somit die größte Menge an hCG.

4. Wie genau ist der Test?

Eine klinische Bewertung wurde durchgeführt, um die Ergebnisse des Test zur Früherkennung mit den Ergebnissen eines anderen im Handel erhältlichen hCG-Tests auf Urinbasis zu vergleichen. Für die klinische Studie wurden 608 am ersten Tag nach Ausbleiben der Periode gesammelte Urinproben verwendet: Beide Tests haben 231 positive und 377 negative Ergebnisse ergeben. Die schnellen hCG-Schwangerschaftstests haben im Vergleich zu den anderen urinbasierten Tests eine Zuverlässigkeit von > 99 % ergeben.

5. Wie empfindlich ist der Test?

Der Test zur Früherkennung kann hCG im Urin ab einer Konzentration von 10 mIU/ml nachweisen. Das Hinzufügen von LH (300 mIU/ml), FSH (1.000 mIU/ml) und TSH (1.000 µIU/ml) zu den negativen Proben (0 mIU/ml hCG) und den positiven Proben (10 mIU/ml hCG) hat keine Kreuzreaktion hervorgerufen.

6. Was muss ich tun, wenn das Ergebnis positiv ist?

Ein positives Ergebnis besagt, dass Ihr Urin hCG enthält und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Suchen Sie Ihren Arzt auf, um Ihre Schwangerschaft zu bestätigen und Ihre ärztliche Betreuung mit ihm zu besprechen.

7. Wie kann ich feststellen, ob ich den Test korrekt durchgeführt habe?

Das Erscheinen einer farbigen Linie im runden Fenster (C) bedeutet, dass Sie den Test korrekt durchgeführt haben und eine ausreichende Menge Urin absorbiert wurde.

8. Was muss ich tun, wenn das Ergebnis negativ ist?

Ein negatives Ergebnis besagt, dass das Hormon hCG in Ihrem Urin nicht nachweisbar war. Das bedeutet, dass Sie nicht schwanger sind oder dass sich Ihr Schwangerschaft in einem Frühstadium befindet, indem das hCG noch nicht nachweisbar ist. In diesem Fall müssen Sie am Tag nach dem Ausbleiben Ihrer Periode einen neuen Test durchführen. Wenn das Ergebnis dieses Tests erneut negativ ausfällt und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

BIO SYNEX
PHARMA

Test di gravidanza precoce

Già dopo 8 giorni dal rapporto sessuale

8 Giorni

Beta-hcg per auto diagnosi.

PRINCIPIO

Il test di gravidanza a 8 giorni rileva la presenza della gonadotropina corionica umana (hCG) in un campione di urina per consentire l'individuazione di una gravidanza. Il test utilizza una combinazione di anticorpi in grado di rilevare in modo selettivo la presenza dell'ormone della gravidanza hCG. Il test si esegue urinando direttamente sulla punta assorbente o immergendo quest'ultima nell'urina. La lettura del risultato avviene tramite la comparsa di linee colorate.

PRECAUZIONI

Leggere attentamente il presente foglietto illustrativo prima di eseguire il test.



- Non utilizzare dopo la data di scadenza stampata sull'involucro di alluminio.
- Conservare in un luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 2 e 30 °C. Non congelare.
- Non utilizzare se l'involucro risulta strappato o danneggiato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Soltanto per diagnosi in vitro. Non ingerire.
- Aprire l'involucro di alluminio soltanto al momento di eseguire il test.
- Il test delle urine utilizzato deve essere smaltito in conformità alla normativa locale.

MATERIALE FORNITO

- Un sacchetto in alluminio che contiene 1 test • 1 sacchetto dessiccante • 1 istruzioni per l'uso

ISTRUZIONI

- Estrarre il test dall'involucro in alluminio e utilizzarlo entro un'ora.
- Togliere il cappuccio dal test, quindi dirigere il flusso di urina sulla punta per 15 secondi o immergere la punta per almeno 15 secondi in un campione di urina raccolto in un contenitore pulito.
- Rimettere il cappuccio sulla punta e posizionare il test su una superficie pulita e stabile. Avviare immediatamente il timer.
- Il risultato deve essere letto non prima di 3 minuti e non oltre i 10 minuti.

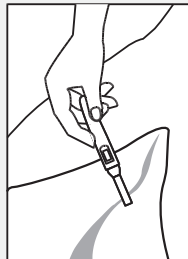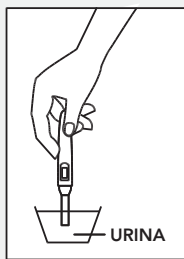

Vous avis nous intéresse ! Complétez le questionnaire disponible en flashant ce QR code ou via le lien suivant :

Ilre Meinung ist uns wichtig! Bitte füllen Sie den online verfügbaren Fragebogen aus, indem Sie den QR-Code scannen oder den folgenden Link anklicken:

Il tuo parere è importante per noi! Compila il questionario disponibile leggendo questo QR Code o tramite questo link:

<https://forms.office.com/e/43AUrgpuXP>



IT

LETTURA DEI RISULTAT




POSITIVO

Compaiono due linee colorate distinte. Una linea deve comparire nella finestra rotonda (C) e l'altra linea deve risultare visibile nella finestra quadrata (T). È probabile che una linea risulti più chiara rispetto all'altra: le linee non devono avere necessariamente la stessa intensità. Tale risultato indica che è probabilmente in corso una gravidanza.



NEGATIVO

Compare una linea colorata nella finestra rotonda (C). Non compare alcuna linea nella finestra quadrata (T). Tale risultato indica che probabilmente non è in corso alcuna gravidanza.

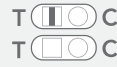

INVALIDO

Il risultato è invalido se non compare alcuna linea colorata nella finestra rotonda (C), anche se compare una linea nella zona della finestra quadrata (T). Occorre effettuare un nuovo test.

LIMITAZIONI

- I farmaci che contengono hCG possono comportare un risultato falso positivo. L'alcol, i contraccettivi orali, gli antidolorifici, gli antibiotici e le terapie ormonali che non contengono hCG non dovrebbero influire sul risultato del test.
- Assumere troppi liquidi prima di eseguire il test può comportare una diluizione delle urine e dell'ormone hCG. Per una diagnosi precoce, si consiglia di utilizzare la prima urina del mattino che generalmente ha una maggior concentrazione di ormone hCG.
- Nelle donne di una certa età o nel periodo della premenopausa, è possibile ottenere un risultato falso positivo (dovuto all'aumento del tasso di hCG di origine pituitaria con l'età).
- Un'interruzione precoce della gravidanza (o un aborto spontaneo molto precoce) può comportare un risultato positivo. Il tasso di hCG crolla quindi rapidamente (invece di aumentare) determinando rapidamente un risultato negativo. Per confermare il proseguimento della gravidanza, si consiglia di eseguire un secondo test sulle prime urine del mattino del primo giorno di ritardo del ciclo mestruale.
- In particolari situazioni cliniche, il test può produrre dei risultati falsi positivi, ad esempio in caso di cancro al seno o ai polmoni o di malattie trofoblastiche.
- Eine diagnosi di gravidanza deve essere confermata da un medico in seguito all'esame dei dati clinici e biologici.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1. Come funziona il test delle urine?

Il test di gravidanza a 8 giorni rileva nella urina la presenza di un ormone che viene prodotto dall'organismo durante la gravidanza (la gonadotropina corionica umana - hCG). La concentrazione dell'ormone hCG aumenta con l'avanzare della gravidanza.

2. Quando è possibile eseguire il test se si sospetta una gravidanza?

Il test di gravidanza a 8 giorni si può eseguire a partire dall'ottavo giorno successivo a un rapporto sessuale fecondante, ossia più di 5 giorni dopo il concepimento. Uno studio ha dimostrato che a tale data il 69% delle donne incinte ha ottenuto un test positivo.

Nota: non bisogna confondere il rapporto sessuale con il concepimento. Quest'ultimo può verificarsi nei 3 giorni successivi al rapporto sessuale. Per questo motivo occorre considerare che 5 giorni dal concepimento equivalgono a 8 giorni dal rapporto sessuale. In caso di risultato negativo e di sospetta gravidanza, si consiglia di eseguire un secondo test sulla prima urina del mattino il primo giorno di ritardo del ciclo mestruale. Nel caso di sospetta gravidanza e di risultato di nuovo negativo, consultare il proprio medico per una diagnosi più approfondita. Il test si può eseguire in qualsiasi momento della giornata. Tuttavia, se è in corso una gravidanza, l'urina del mattino contiene una maggior concentrazione di ormoni hCG.

3. Occorre eseguire il test con la prima urina del mattino?

Anche se il test può essere eseguito in qualsiasi momento della giornata, la prima urina del mattino è in genere quella più concentrata e contiene pertanto una maggior quantità di hCG.

4. Quanto è preciso il test?

È stata condotta una valutazione clinica per confrontare i risultati ottenuti utilizzando il test di gravidanza a 8 giorni con quelli di un altro test delle urine hCG disponibile sul mercato. Lo studio clinico realizzato sui campioni prelevati a partire dal primo giorno di ritardo del ciclo mestruale comprendeva 608 campioni di urine: i due test hanno individuato 231 risultati positivi e 377 risultati negativi. I risultati hanno dimostrato un'affidabilità superiore al 99% per il Test di gravidanza hCG rapido confrontato con l'altro test delle urine hCG.

5. Quanto è sensibile il test?

Il test di gravidanza a 8 giorni rileva l'hCG nell'urina a partire da una concentrazione di 10 mIU/ml. L'aggiunta di LH (300 mIU/ml), di FSH (1.000 mIU/ml) e di TSH (1.000 µIU/ml) a campioni negativi (0 mIU/ml hCG) e positivi (10 mIU/ml hCG) non ha determinato reattività crociate.

6. Cosa fare in caso di risultato positivo?

Un risultato positivo indica che l'urina contiene hCG ed è probabilmente in corso una gravidanza. Consultare il proprio medico per la conferma e la gestione della gravidanza.

7. È possibile sapere se il test è stato eseguito in modo corretto?

La comparsa di una linea colorata nella finestra rotonda (C) indica che la procedura del test è stata seguita in modo corretto e che è stata assorbita una quantità di urina sufficiente.

8. Cosa fare in caso di risultato negativo?

Un risultato negativo indica che nell'urina non è stato rilevato l'ormone hCG. Ciò si verifica in assenza di gravidanza oppure in una fase molto precoce con un livello impercettibile di hCG. Occorre eseguire un nuovo test il primo giorno di ritardo del ciclo mestruale. In caso di risultato ancora una volta negativo e di ritardo del ciclo mestruale, consultare il proprio medico.

BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIA

- Steier JA, P Bergsjö, OL Myking Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion and removed ectopic pregnancy, *Obstet. Gynecol.* 1984; 64(3): 391-394.
- Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human cho<ronic gonadotropin and its subunits inhydatidiform mole and choriocarcinoma, *Obstet. Gynecol.* 1977; 50(2): 172-181.
- Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross "Ectopicproduction of human chorionic gonadotropin by neoplasms", *Ann. Intern Med.* 1973; 78(1): 39-45.

Consulter la notice d'utilisation / Bitte Gebrauchsanweisung beachten / Consultare il foglio illustrativo	Ne pas réutiliser / Nicht wiederverwenden / Non riutilizzare
Contient suffisamment pour <-> tests / Enthält ausreichend für <-> Tests / Contiene abbastanza per <-> test	Date de péremption / Verfallsdatum / Data di scadenza
Limite de température / Temperatursgrenze / Limite di temperatura	LOT Numéro de lot / Charge number / Numero lotto
Référence catalogue / Katalognummer / Catalogo #	Fabricant / Hersteller / Fabricatore
Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medizinisches Gerät zur in-vitro-Diagnostik / Dispositivo medico per la diagnostica in vitro	Signalétique commune TRIMAN. Consigne de tri valable seulement en France / Einheitsliche TRIMAN-Produktkennzeichnung. Sortieranweisung, die nur in Frankreich gültig ist / Segnalatica comune TRIMAN. Istruzioni di smistamento valide solo in Francia.
Garder au sec / Trocken halten / Tenere asciutto	Code d'identification des matériaux d'emballage / Code zur Identifizierung von Verpackungsmaterial / Codice di identificazione per i materiali di imballaggio
Mandataire Suisse / Bevollmächtigter Schweiz / Agente svizzero	Importateur / Importeur / Importatore
Ne pas utiliser si emballage endommagé / Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist / Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato	

SERVICE CONSOMMATEURS
CONSUMER DEPARTMENT
+36 3 85 78 85 24
Assistenza al cliente in Francia
client@biosynex.com
www.biosynex.com

BIO SYNEX SA
22 Boulevard Sébastien Brant
67400 LLLKIRCH-GRAPPENSTADEN
France

CH REP BIO SYNEX SWISS SA Route de Rossmaison 100, 2800 Delémont - Suisse



IFU_859977_DACH_V01202405R01
REF: 859977
Date de dernière révision / Datum der letzten Revision
Data dell'ultima revisione: 05/2024